


IMPLANT SEVEN W GARMEDZIE

SEVEN to nowoczesny i uniwersalny implant firmy MIS Implant Technologies Ltd., która weszła na polski rynek w listopadzie ubiegłego roku. Seven przeznaczony jest do zabiegów implantacji w szerokim spektrum rodzajów kości. Konstrukcja implantu zapewnia bardzo dobrą stabilizację pierwotną wszczepu oraz optymalne warunki osteointegracji. Budowa implantu wykorzystuje fizjologiczne cechy kości, co gwarantuje znakomitą estetykę i optymalne przenoszenie obciążeń oraz zapewnia znacznie większą ilość kości i tkanek miękkich wokół implantu. Nowoczesny, geometryczny kształt implantu Seven charakteryzuje się podwójnym gwintem, trzema spiralnymi

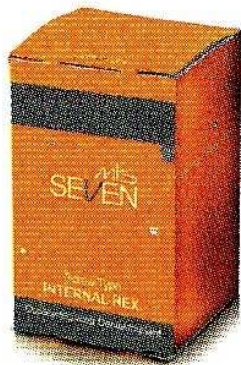

kanałami wychodzącymi z wierzchołka, mikropierścieniami na szyjce i zmiennym skokiem gwintu na długości implantu. Mikropierścienie umożliwiają lepszą stabilizację pierwotną poprzez zwiększoną wytrzymałość połączenia z kością w części przyszyjkowej implantu. Zmienna grubość krawędzi gwintu poprawia kompresję kości w trakcie wkręcania.

Dostępne średnice: \varnothing 3,75 mm, \varnothing 4,20 mm i \varnothing 5 mm i \varnothing 6 mm. Każdy dostarczany jest ze specjalnie opracowanym wiertłem ostreocnym, co zapewnia szybkie i bezpieczne wiercenie. Implant Seven spełnia wszystkie normy. Rejestracja na terenie RP pod nr PL/DR 016469. Dostępne są w ciągłej sprzedaży w firmie Garmed, która jest wyłącznym dystrybutorem systemu MIS w Polsce.

KONTAKT
GARMED Sp. z o.o.
tel. 022 338 70 50
www.garmed.pl